


● Mepilex® Border Lite

DEN TYNNE EFFEKTIVE ABSORBERENDE ALT-I-ETT SKUMBANDASJEN

- Minimerer smerte og skade ved bandasjeskift^{1,2}
- God og effektiv væskehåndtering
- Sikker fiksering, men likevel atraumatisk fjerning
- Dusjtett

Film bakside

- Pustende
- Dusjtett
- Bakterie- og virustett

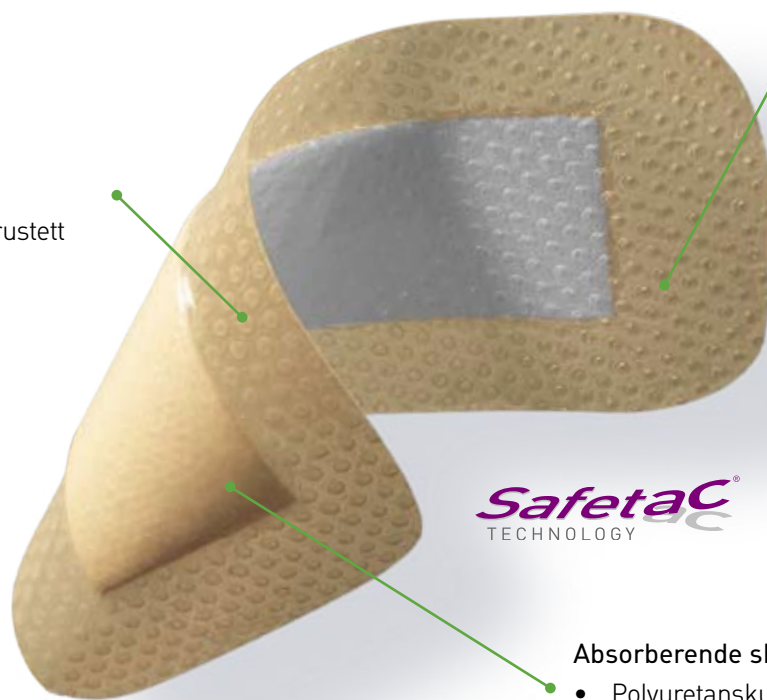

Safetac® teknologi

- Atraumatisk mot såret og omkringliggende hud ved fjerning¹
- Minimerer risikoen for maserasjon ved å danne en barriere rundt sårkantene³
- Hefter til tørr hud, men ikke til det fuktige såret

Safetac
TECHNOLOGY

Absorberende skumpute


- Polyuretanskum for rask absorpsjon av sårveske
- Nonwoven spredningslag for optimal absorpsjonskapasitet og forhindring av lekkasje

Safetac® technology


Safetac® teknologi. Mindre skade. Mindre smerte.

Safetac er en patentert hefteteknologi som minimerer skade på såret og smerte for pasienten. Safetac teknologi finnes kun i bandasjer fra Mölnlycke Health Care, inkludert Mepilex®-familien, Mepitel®, Mepiform® og Mepitac®.

For mer informasjon se www.safetac.com

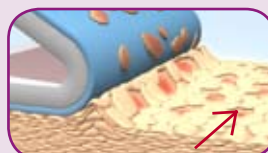


Hudstripping ved bruk av tradisjonelle heftemidler

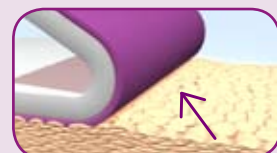


Ingen hudstripping ved bruk av Safetac teknologi

Hvordan bruke Mepilex Border Lite

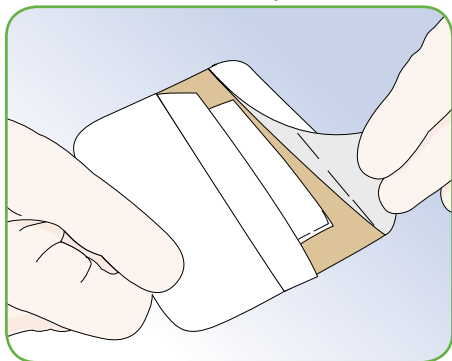

Rens sårområdet
Fjern releasepapiret

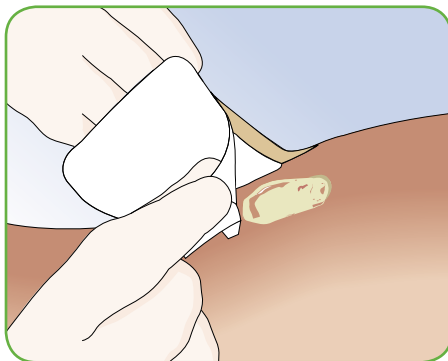

Appliser den heftende siden mot såret
Ikke strekk

Slik fungerer Mepilex Border Lite

Mepilex Border Lite er en tynn alt-i-ett skumbandasje som absorberer og holder på sårvesken og et fuktig sårmiljø. Safetac forsegler sårkantene og hindrer at sårveske lekker ut på omkringliggende hud. Dermed forhindres maserasjon. Safetac sikrer at bandasjen kan skiftes uten å skade den omkringliggende huden og uten å utsette pasienten for ytterligere smerte.

NB!

Dersom det er kliniske tegn til infeksjon, kan bruken fortsette dersom man iverksetter infeksjonsbehandling.

Fordeler med Mepilex Border Lite

- En tynn, formbar og komfortabel alt-i-ett bandasje
- Minimerer skade og smerte ved bandasjeskift
- Dusjtett
- Kan brukes under kompresjon
- Kan ligge på såret i opptil syv dager avhengig av sårets tilstand
- Kan løftes og justeres uten å miste den heftende egenskapen
- Liten risiko for hudirritasjon og allergi

Bruksområder

Mepilex Border Lite egner seg til bruk på en rekke ikke-til lite væskende sår, som for eksempel legg- og fotsår, trykksår og traumatiske sår som hudavskrapninger, flenger, kuttskader, fingerskader eller blemmer. Mepilex Border Lite egner seg også som beskyttelse på sår som er tilhelet, eller skjør hud.



MEPILEX BORDER LITE SORTIMENT (sterilt pakket)

Art.nr.	Str. i cm	Antall i eske	Antall i kartong
281000	4 × 5	10	70
281100	5 × 12,5	5	65
281200	7,5 × 7,5	5	70
281300	10 × 10	5	50
281500	15 × 15	5	50