


# Mepore® Film & Pad

Pustende, transparent, selvheftende,  
absorberende filmbandasje

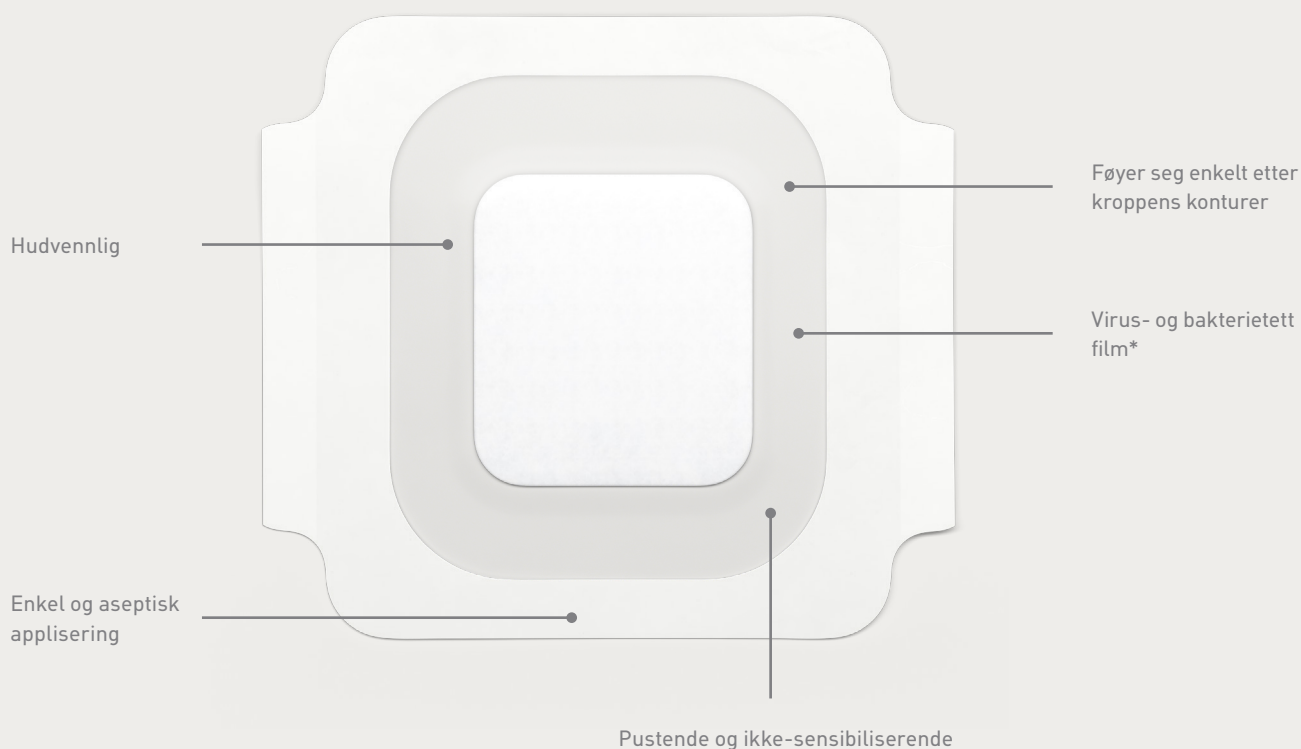

\* mikrober større enn 25 nm

Mepore® Film & Pad egner seg til bruk på lite til moderat væskende sår, som operasjonssår, kutt og skrubbsår.

Den holder seg på plass, er enkel og skånsom å fjerne og den er vanntett.

## Hvordan bruke Mepore® Film & Pad



1. Fjern releasepapiret. Tilpass bandasjen over såret og legg den på huden uten å strekke.



2. Fjern papirrammen og de to hvite sidestriplene.



3. Før hånden over bandasjen i noen sekunder for å sikre god hefting.

## Hvordan Mepore Film & Pad fungerer

Mepore Film & Pad er en pustende, transparent, selvheftende, absorberende filmbandasje, som er ideel for absorpsjon av blod og eksudat. Den beskytter såret og kan sitte på i flere dager.

Det hudvennlige heftemiddelet sørger for skånsom fiksering. Den er enkel å applisere, også ved bruk av hansker.

Finnes i et bredt utvalg av størrelser.

## Fordeler med Mepore Film & Pad

- Holder seg på plass
- Virus- og bakterietett film\*
- Fleksibel og transparent film
- Føyer seg enkelt til kroppens konturer
- Aseptisk påføring er mulig
- Dusjtett
- Lavheftende sårkontaktlag

\* mikrober større enn 25 nm



## Bruksområder

Mepore Film & Pad egner seg til bruk på lite til moderat væskende sår, som operasjonssår, kutt og skrubbsår.

Den absorberer blod og eksudat og beskytter såret. Filmen er væsketett og har god pusteevne.

## Skiftfrekvens

Skiftfrekvensen vil bestemmes av sårets tilstand. Mepore Film & Pad kan sitte på i flere dager.

## Mepore Film & Pad (sterile engangspakninger)

Art. Nr.	Str. i cm	Str. på sårpute i cm	Ant. i eske	Ant. i kartong
275100	4 x 5	1,5 x 2,5	85	340
275110	4 x 5	1,5 x 2,5	5	70
275200 [oval]	5 x 7	2,5 x 4	85	340
275210 [oval]	5 x 7	2,5 x 4	5	70
275300	5 x 7	2,5 x 4	85	340
275310	5 x 7	2,5 x 4	5	70
275400	9 x 10	4,5 x 5	30	180
275410	9 x 10	4,5 x 5	5	50
275500	9 x 15	4,5 x 10	30	240
275510	9 x 15	4,5 x 10	5	50
275600	9 x 20	4,5 x 15	30	240
275610	9 x 20	4,5 x 15	5	40
275700	9 x 25	4,5 x 20	30	150
275800	9 x 30	4,5 x 25	25	125
275900	9 x 35	4,5 x 30	25	100

Les mer på [www.molnlycke.no](http://www.molnlycke.no)

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Besøksadresse Brynsalléen 4, 0667 Oslo. Tlf. +47 22 70 63 70. Varemerkene, navnene og logoene til Mölnlycke og Mepore er registrert globalt av ett eller flere av selskapene i konsernet Mölnlycke Health Care. ©2023 Mölnlycke Health Care AS. Med enerett. NOWC4212308

  
**Mölnlycke®**