

Renser sår. Støtter sårhelingen.



Granudacyn®

Tøff mot patogener. Kompatibel med menneskelige celler.


Mölnlycke®

Én løsning. Mange sår.

Granudacyn® er en sårskyllevæske, trygt konserveret med Hypoklorsyre (HOCl). Det brukes til å rense og fukte kroniske, akutte, kirurgiske og kontaminerte sår samt for første- og annengradsforbrenninger. **Det kan også brukes på sensitivt vev som brusk, sener, leddbånd og bein¹, eller i øret, munnen, bukhinnen og i fistler.**

✓ Effektiv på alle typer sår

Granudacyn® kan brukes på alle kroniske sår, inkludert diabetiske fotsår, trykksår og venøse leggsår. I tillegg kan det brukes på akutte og kontaminerte sår samt første og annengrads brannskader.

✓ Bevist trygt og effektivt

Flere tester viser effektiviteten, biokompatibiliteten og sikkerheten ved bruk av Granudacyn².

Effektiv konservering mot Gram +/- bakterier, virus, sopp og sporer²



✓ Reduserer odør

HOCl reduserer raskt odør fra såret^{3,4}, som ofte forbindes med nekrotisk vev eller bakteriell kolonisering.

✓ Bedre behandling, bedre livskvalitet

Å håndtere infeksjoner uten å avbryte den naturlige helingsprosessen er viktig for pasientens velvære og støtter sårhelingen.


✓ Lang holdbarhet. Lett tilgjengelig

Granudacyn® kan lagres i romtemperatur og kan brukes på flere pasienter i opptil 90 dager (gel) eller 60 dager (skyllevæske).

Naturlig, som immunforsvaret

Slik virker det


Påfør sårsengen Granudacyn® før såret rengjøres. Løsningen krever ikke nøytralisering eller skylling, og kan brukes til å fukte sårbandasjen og selve såret.

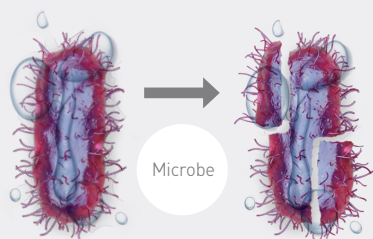

1. Forstyrrer celleveggs struktur.

Hypoklorsyren i Granudacyn® penetrerer celleveggen i mikroorganismen og øker dens permeabilitet⁵.

Granudacyn®
letter mekanisk
fjerning av
mikroorganismer
og celleavfall

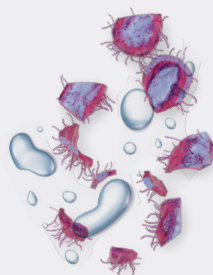

2. Økt osmotisk trykk fører til celleruptur

En hyperton løsning fører til at vann flyter inn i cellen for å utligne det osmotiske trykket. Dette fører til økt trykk i cellen slik at den brister.

Trygt å bruke


Granudacyn er ikke-cytotoksisk og ikke-irriterende⁸.

Beskytter såret mot biofilm

HOCl er effektivt i frigjøring av biofilm og støtter debridering^{6,7,9}.


Svært biokompatibel

Granudacyn er bevist å være svært biokompatibel, hvilket betyr at det har et positivt nytte/risiko-forhold³.

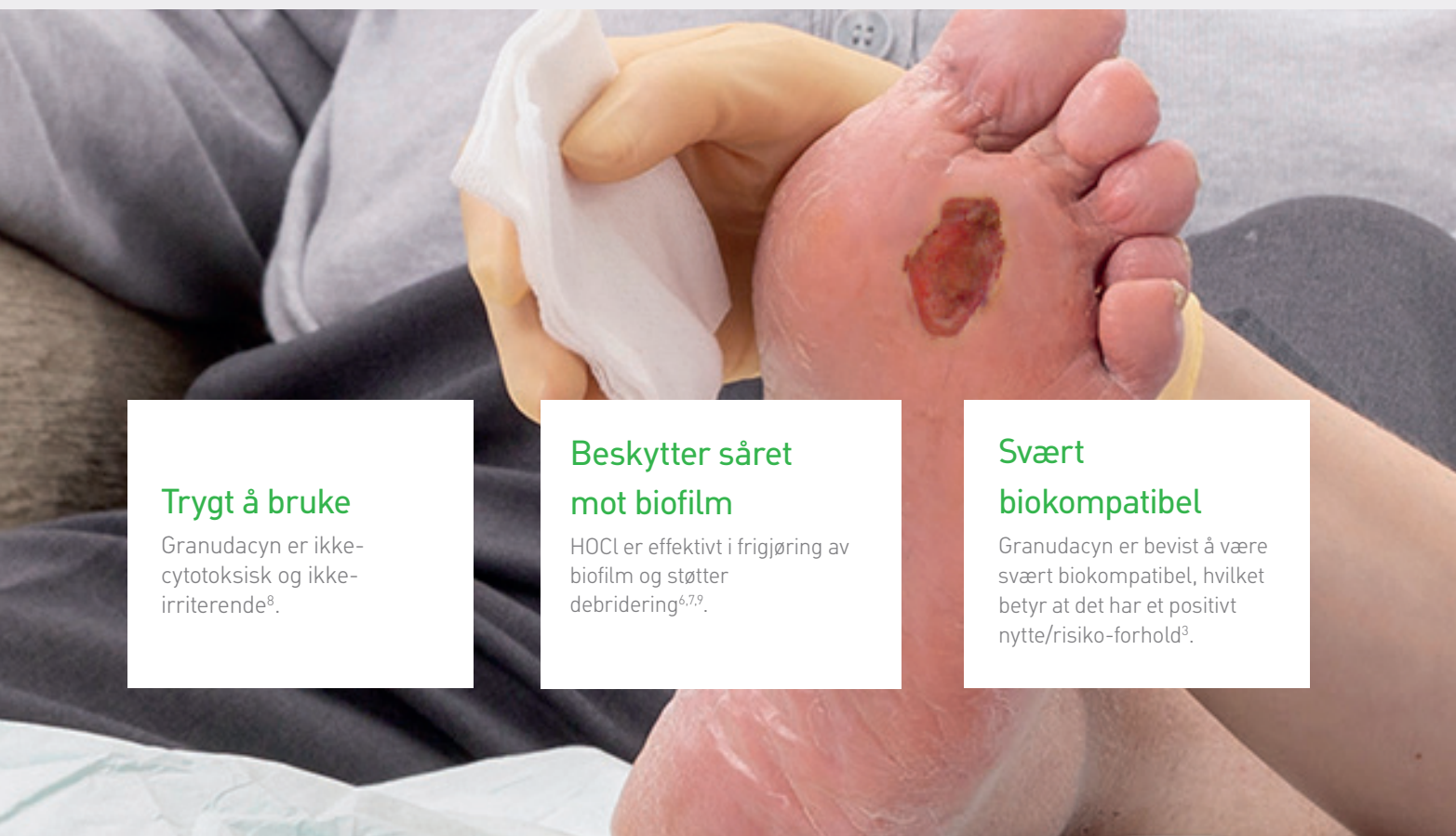


Påføring


Sårskylning og spray: For rensing med presis dosering og påføring

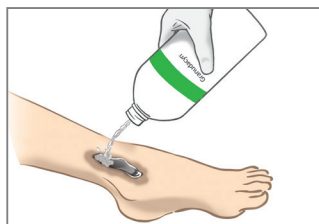


1. Skånsom sårrensing med Granudacyn skyllevæske.

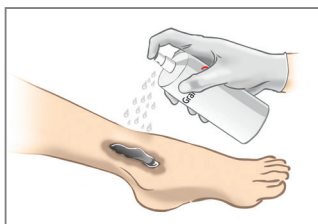

2A. Sprayes på rens et sår fra omlag 15-30 cm avstand.

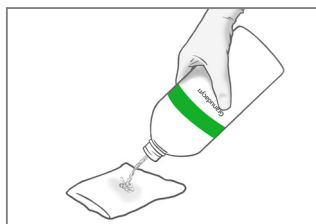


2B. Rens såret, eller fukt med en kompress og legg det i såret.

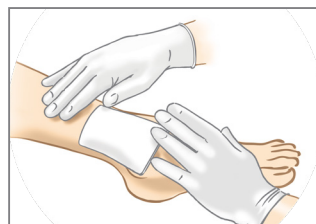


3. Kan brukes i kombinasjon med standardbandasjer.

Granudacyn kan bli brukt som løsning til installasjon med NPWT (undertrykksbehandling).

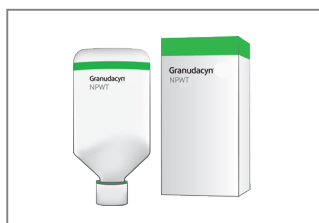

1. Ta NPWT-flasken ut av esken.

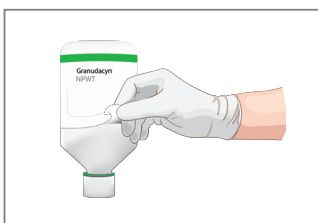

2. Åpne bærehanken fra etiketten og stikk hull på flasken.



3. Heng flasken i hanken på stativet.

Sortiment

	Mengde	Art. nr.	Holdbarhet	Ant. pr. trp
Granudacyn® sårskyllevæske	50 ml spray	360150	30 måneder	20
	250 ml spray	360100		15
	500 ml	360101		12
	1000 ml	360102		6
	500 ml NPWT	360103		12
	1000 ml NPWT	360104		6
Granudacyn® sårgel	50 g	360107	24 måneder	12
	100 g spray	360108		12
	250 g spray	360106		15



Referanser:

1. AA., Gutiérrez. The science behind stable, super-oxidized water. . Wounds . 2006 (Suppl.): 7-10. 2. In-vitro suspension test (EN13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476 – phase 2) with Granudacyn wound irrigation solution. 3. Consensus on Wound Antisepsis: Update 2018, Skin Pharmacol Physiol 2018;31:28–58, DOI: 10.1159/000481545. 4. Armstrong DG, Bohn G, Glat P, Kavros SJ, Kirsner R, Snyder R et al. Expert recommendations for the use of Hypochlorous solution: science and clinical application. Ostomy Wound Manage 2015; 61 (5 suppl): 4S-18S. 5. Fukuzaki, Biocontrol Science, 2006, Vol.11, N4, 147-157 6. Edwards-Jones V, Flanagan M, and Wolcott R. Technological advancements in the fight against antimicrobial resistance. Wounds Int 2015;6(2):47–51. 7. R D Wolcott, J Fletcher, Role of wound cleansing in the management of wounds, Wounds Middle East ,Vol (1) 2014. 8. Method Ph.Eur. 2.2.35, test conducted by BIOSERV Analytik- und Medizinprodukte GmbH, Rostock, Germany. 9. Sakarya S, Gunay N, Karakulak M, Östürk B, Ertugrul B. Hypochlorous acid: an ideal wound care agent with powerful microbicidal, antibiofilm, and wound healing potency. .Wounds. . 2014;26(12):342–350.31.

Les mer på www.molnlycke.no

Molnlycke Health Care AS. Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Telefon 22706370.
The Molnlycke and Granudacyn trademarks names and logos are registered globally to one or more of the Molnlycke Health Care Group of Companies. ©2023 Molnlycke Health Care AB. All rights reserved. NOWC3942305