

Sitter på. Optimal føyelighet.

- Flex-teknologi sikrer suveren fleksibilitet¹ og føyelighet slik at bandasjen ikke løsner²
- Dokumentert bedre væskehåndteringskapasitet* enn andre alt-i-ett skumbandasjer³
- Test viser at Mepilex® Border Flex frigir inntil 22 ganger færre bakterier enn andre bandasjer (in vitro-studier)⁴
- Med væskeindikatorsystemet kan du overvåke og registrere sårvæsken⁵ slik at unødvendige bandasjeskift kan unngås
- Til bruk på en rekke væskende sår⁶
- Også tilgjengelig i ovale størrelser for større valgfrihet

Flex-teknologi – Føyelig og sitter på

- 360° fleksibilitet
- Bedre komfort⁶⁻⁸
- Mindre risiko for at bandasjen løsner²
- Mindre belastning på huden⁶⁻⁸



Pustende baksidofilms

- Effektiv fordamping
- Med væskeindikatorsystemet kan du overvåke og registrere sårvæsken¹¹. Du kan kontrollere fargen på sårvæsken
- Fungerer som en barriere mot bakterier større enn 25 nm.¹²
- Dusjtett¹³



Retensjonslag

- Håndterer effektivt både normal og tyktflytende sårvæske⁹
- Kapsler inn bakteriell sårvæske¹⁰
- Sammen med spredningslaget og baksidofilmen bidrar retensjonslaget til effektiv fordamping⁹



Spredningslag

- Fordeler sårvæsken utover hele flaten for optimal overføring til retensjonslaget og baksidofilmen¹⁴



Skumlag

- Absorberer sårvæsken og transporterer den til spredningslaget¹⁵

Innkapsling av bakterier

De fem lagene i Mepilex® Border Flex virker sammen for å absorbere, transportere og kapsle inn bakteriell sårvæske og hindre den i å trenge tilbake til såret, selv under kompresjon¹⁰



Safetac® sårkontaktlag

- Minimerer smerte ved bandasjeskift¹⁶ og reduserer risikoen for maserasjon^{17,18}
- Enkel å håndtere. Du kan fjerne bandasjen uten å skade huden¹⁶
- Safetac® beskytter også nytt vev, slik at den naturlige sårtilhelingen ikke forstyrres^{17,18}

Mepilex® Border Flex

Mölnlycke®

Utviklet for å forme seg etter kroppen og bli sittende

Grunnet den unike Flex-teknologien har Mepilex® Border Flex bedre føyelighet enn andre testede skumbandasjer¹. Bandasjen følger pasientens bevegelser og sitter, selv i dusjen¹³.

Intelligent væskehåndtering

De fem lagene i bandasjen absorberer, kanaliserer og kapsler inn sårvesken, og du kan overvåke og registrere sårvesken fra utsiden^{5, 10, 14, 15}. Sårvesken hindres i å trenge tilbake til såret, selv under kompresjon¹⁰. Den har opptil 2,2 ganger bedre væskehåndteringskapasitet enn andre testede skumbandasjer med heftkant³ og kan håndtere både normal og tyktflytende sårveske⁹.

Reduserer smerte og skade

Vår dokumenterte Safetac® teknologi innebærer mindre smerte¹⁶ og skade¹⁶ ved bandasjeskift, og mindre risiko for maserasjon enn med tradisjonelle (heftende) bandasjer^{17,18}.

Bruksområder

Mepilex® Border Flex kan brukes til å behandle en rekke væskende sår, trykksår, legg- og fotsår, traumatisk sår (f.eks. hudflenger) og operasjonssår. Bandasjen kan også brukes på sorte/nekrotiske sår i kombinasjon med geler. Mepilex Border Flex reduserer forekomsten av postoperative blemmer, og kan også brukes som del av profylaktisk behandling for å forhindre skade på huden, som for eksempel trykksår.

Merk: Ved tegn til klinisk infeksjon, rådfør helsepersonell for riktig infeksjonsbehandling.

Enkel applisering



Det tredelte releasepapiret gjør det enkelt å plassere bandasjen nøyaktig og sikkert, uten folder, opprullede kanter og gjentatte appliseringer.



Tilgjengelig i oval form.


Sortiment (sterile enhetspakninger)

Firkantet

Art. nr.	Størrelse i cm	Antall i eske	Antall i kartong
595200	7,5 x 7,5	5	50
595300	10 x 10	5	50
595000	12,5 x 12,5	5	50
595400	15 x 15	5	50
595600	15 x 20	5	50
595800	10 x 20	10	30
595850	10 x 25	10	30
595900	10 x 30	10	40

Oval

Art. nr.	Størrelse i cm	Antall i eske	Antall i kartong
583500	7,8 x 10	5	50
583300	13 x 16	5	35
583400	15 x 19	5	45

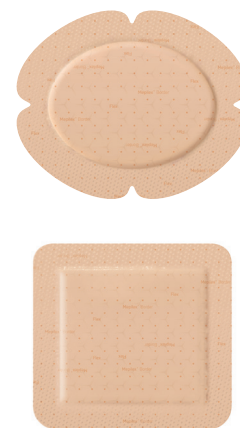

Referanser: 1. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – Conformability Report. Data on file. 2. Allen. Comparison of Mepilex® Border Flex dressing and Mepilex® Border dressing in wet condition. Report no. PD-530246. 18 January 2017. Data on file. 3. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – Fluid handling capacity compared to Urgotul Foam Absorb Border, Aquacel Foam, Allevyn Classic Gentle Border, Allevyn Life, Optifoam Gentle, KerraFoam Gentle Border. Data on file. 4. Karlsson et al. Bacterial trapping of a newly developed all-in-one soft silicone foam dressing. Poster. EWMA, Krakow 2018. 5. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – Product Manual – Dot Pattern. Data on file. 6. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – External data – FEM simulations MxB Flex vs Allevyn Life. Data on file. 7. Mölnlycke Health Care. FEM – Mepilex® Border Flex vs Optifoam gentle. Data on file. 8. Mölnlycke Health Care. FEM – Mepilex® Border Flex vs Aquacel foam. Data on file. 9. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – Absorption and dispersion tests on inclined plane, viscous test solution. Data on file. 10. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – Bacteria encapsulation. Data on file. 11. Mölnlycke Health Care. Data on file. 2018. 12. Mölnlycke Health Care. Product Manual Mepilex® Border Flex – Viral penetration. Data on file. 13. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – Waterproofness. Data on file. 14. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – Spreading layer spreads exudate evenly across the surface. Data on file. 15. Mölnlycke Health Care. Product Manual – Maintained dressing profile. Data on file. 16. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008;4(1):14-22. 17. Woo, K., Coutts, P.M., Price, P., Harding, K., Sibbald, R.G. A randomised crossover investigation of pain at dressing change comparing foam dressings Advances in Skin and Wound Care 2009;22(7):304-310. 18. Meaume S. et al. A study to compare a new self-adherent soft silicone dressing with a self-adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management, 2003. 19. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex. Report no. PD-530091. Data on file.

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Besøksadresse: Brynsalléen 4, 0667 Oslo. Tlf. +47 22 70 63 70. The Mölnlycke, Mepilex and Safetac trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies. ©2022 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. NOWC0782211